



STAR

a part of Etac

StarLock-tyynyjen käyttöohje

Ilmakennotyyny dynaamisella ilmavirtauksella

Käyttäjät: Lukekaa ohjeet ennen tuotteen käyttöä ja säästäkää nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten

Tietoja tästä oppaasta

Tämä käyttöohje sisältää tietoja Star-tyynystä. Lue käyttöohjeet kokonaan ennen käyttöä. Star Cushion Products, Inc. ei vastaa mistään ongelmista, jos ohjeita ei noudateta. Jos sinulla on muuta kysyttävää USA:ssa, ota yhteyttä Star Cushioniin. Kansainvälisten asiakkaiden tulee ottaa yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Sisällysluettelo

Sivu 1: Tietoa tästä käyttöohjeesta/sisällysluettelo

Sivu 2: Käyttötarkoitus

Sivu 3-4: Asiakkaan vastuu/varoitukset

Sivu 5: Tuotespesifikaatiot

Sivu 6: Toimitussisältö

Sivu 7-9: Käyttöohjeet

Sivu 10: Päällisen käyttö ja irrottaminen

Sivu 11-12: Puhdistus- ja desinfiointiohjeet

Sivu 13: Takuut/palautukset/hävittäminen

Sivu 14: Vianmääritys/yhteystiedot

Tämän käyttöohjeen sisältämiä tuotteita saattaa koskea yksi tai useampi Yhdysvaltain tai ulkomaan patenti tai tavaramerkki. Lisätietoja saa osoitteesta www.starcushion.com.

Star Cushion Products on sitoutunut jatkuvaan tuotteidensa parantamiseen, joten tämän asiakirjan sisältö saattaa muuttua. Uusin versio tästä asiakirjasta löytyy osoitteesta www.starcushion.com.

Käyttötarkoitus:

Jokainen tämän käyttöohjeen Star Cushion -tuote on ilmalla säädettävä, kennomaisella rakenteella toteutettu pyörätuolin istuintyyppi. Painorajoitusta ei ole, jos tyyppi on käyttäjälle sopivan kokoinen.

Star Cushion Products, Inc. suosittelee, että terveydenhuoltoalan ammattilainen, joka on erikoistunut pyörätuolin käyttäjän istumiseen, asentoihin ja liikkumiseen arvioi, onko tyyppi sopiva kyseiselle henkilölle sekä tuleeko tyypin kanssa käyttää erillistä kovapohjalevyä istuinverhoilun päällä.

Kussakin seuraavista tuotteista hyödynnetään dynaamista ilmavirtausteknologiaa. Istuintyyppi on tarkoitettu mukautumaan käyttäjän muotoon niin, että ne suojaavat ihoa ja pehmytkudoksia sekä edistävät haavan ympäristön parantumista.

StarLock (2" / 5 cm)

StarLock (3" / 7,6 cm)

StarLock (4" / 10 cm)

StarLock (5" / 12,7 cm)

Asiakkaan vastuu:

- Kaikki tämän käyttöohjeen ohjeet on luettava ja niitä on noudatettava
- Tarkista ja säädä tyyny säännöllisesti ja varmista, että se on täytetty ja joustaa asianmukaisesti. Suosittelemme tekemään tarkistukset päivittäin.
- Jos et pysty tekemään jotain tämän ohjeen suosituksista, pyydä apua
- Jos tarvitset apua tämän ohjeen tehtävien ymmärtämisessä, pyydä apua istumiseen, asentoihin ja liikkuvuuteen erikoistuneelta terapeutilta

Varoitukset:



Tarkista täyttö: Vähintään kerran päivässä.



Tarkista iho: Tarkista iho usein, vähintään kerran päivässä. Ihon ja pehmytkudosten vauriot voivat johtua monesta syystä, jotka voivat vaihdella potilaskohtaisesti. Punoitus, mustelmat tai ihon värimuutokset voi merkitä pehmytkudosvauriota tai ihon rikkoutumista. Jos näin tapahtuu, ota välittömästi yhteyttä hoitavaan lääkäriin.



Tyynyn ja päällisen yhteensopivuus: Tyynyn ja päällisen tulee olla yhteensopivaa kokoa, ja niitä on käytettävä tämän käyttöohjeen mukaan. Muussa tapauksessa tyynyn tuomat edut voivat vähentyä tai jopa estyä, mikä lisää iholle ja/tai pehmytkudoksille aiheutuvaa vaaraa. Lisäksi se saattaa lisätä epävakauden ja putoamisen vaaraa.



Tyynyn ja päällisen suunta: Star Cushion -tyynyä tulee käyttää ilmakennot ylöspäin. Jos tyyny ei ole ylöspäin tai jos suojaa ei käytetä oikein, tyynyn tuomat edut voivat vähentyä tai jopa estyä, mikä lisää iholle ja/tai pehmytkudoksille aiheutuvaa vaaraa.



Vajaa täyttö: ÄLÄ KÄYTÄ vajaaksi täytettyä tyynyä. Riittämätön täyttö tai ilman karkaaminen tyynystä voi heikentää kehon saamaa tukea. On tärkeää, että käyttäjä uppoaa tyynyyn, mutta ei kosketa tyynyn pohjaa. Pohjan kosketuksen seurauksena voi syntyä painepiikkialueita, jotka pitkittyessään saattavat aiheuttaa iholle ja/tai pehmytkudokselle rikkoutumisvaaran.



Ylityttäminen: ÄLÄ KÄYTÄ liian täyteen täytettyä tyynyä. Jos tyyny ei ole oikeassa asennossa käyttäjään nähden, se aiheuttaa painepiikkejä. Tämä heikentää tai kokonaan poistaa tyynyn tuomat edut sekä lisää iholle ja/tai pehmytkudoksille aiheutuvaa vaaraa.



Lukitus (yksi käyttäjä): Älä anna kenenkään toisen käyttää tai lukita tyynyäsi. Tämä tyyny on suunniteltu mukailemaan kehon muotoja, kun istuja vajoaa tyynyyn. Tämä muoto pysyy, kun tyyny lukitaan. Jos toinen henkilö käyttää ja lukitsee tyynyn, voi sen seurauksena kohdistua epätasaisia painepiikkejä ihoon ja pehmytkudoskiin. Tämä voi aiheuttaa ihorikkoja.



Turvaventtiili: Varmista aina, että turvaventtiili on käännetty niin, että se on X-asennossa letkuihin nähden ollessaan lukossa. Jos turvaventtiili on samaan suuntaan letkujen kanssa, lukitus saattaa avautua vahingossa. Tämä voi johtaa tyynyn epävakauteen tai virheelliseen ilman täyttömäärään.



Ilmasto: Jos tyynyä on säilytetty alle 0 °C:n lämpötilassa ja se on epätavallisen jäykkä, anna tyynyn lämmetä huoneen lämpöiseksi. Puristele sitten tyynyä käsissäsi tai rullaa se kiinni ja auki (venttiili avoinna), kunnes neopreeni on taas pehmeää ja taipuisaa. Toista säätötoimenpiteet ennen käyttöä. Vältä kovaa kuumuutta ja pidä tuote poissa lämmönlähteiden, kuuman tuhkan tai avotulen läheisyydestä.



Paine: Korkeuden muutokset voivat edellyttää tyynyn täytön säätämistä uudelleen. Tarkista täyttö aina, kun korkeus muuttuu.



Puhkeaminen: Jotta tyyny ei puhkeaisi, säilytä sitä poissa terävien esineiden lähettäviltä.



Käsittely: ÄLÄ kanna tai vedä tyynyä venttiilistä. Kanna tyynyä päällisen kahvasta tai nosta ja kanna sitä pohjasta kiinni pitäen.



Esteet: ÄLÄ aseta esteitä käyttäjään ja tyynyn väliin, sillä se saattaa heikentää tai kokonaan poistaa sen tuomat edut ja lisätä iholle ja/tai pehmytkudoksille aiheutuvaa vaaraa.



Epävakaus/putoamisvaara: ÄLÄ käytä tyynyä muiden tuotteiden tai materiaalien kanssa tai päällä, jos niitä ei ole lueteltu kohdassa Käyttötarkoitus. Seurauksena saattaa olla epävakaata käyttöä ja/tai putoaminen.

Tuotespesifikaatiot:

Tällä käyttöohjeessa käsitellyt tyynyt on valmistettu lateksittomasta neopreenistä, jossa on uretaanipohja ja galvanoitu kupariventtiili. Nämä tyynyt kestävät käytössä oikein käytettyinä ja huollettuina (pieniä korjauksia saatetaan tarvita) 5 vuotta.

Tyynty	Korkeus	Keskipaino*
StarLock (SL2)	2" (5 cm)	2,6 lbs (1,18 kg)
StarLock (SL3)	3" (7,6 cm)	3,2 lbs (1,43 kg)
StarLock (SL4)	4" (10 cm)	3,3 lbs (1,5 kg)
StarLock (SL5)	5" (12,7 cm)	3,9 lbs (1,76 kg)

*Huomaa: Keskiarvopainot on ilmoitettu kennotyynyille 9 x 9.

Kennot: Tyyny 2" (5 cm), 3" (7,6 cm) tai 4" (10 cm)	Leveys/syvyys (tuumaa)	Leveys/syvyys (cm)
6	11.75"	30 cm
7	13.5"	34 cm
8	15.5"	39 cm
9	17.25"	44 cm
10	19.25"	49 cm
11	21"	53 cm
12	22.75"	58 cm
13	24.75"	63 cm
14	26.5"	67 cm

Kennot: 5" (12,7 cm) tyyny	Leveys/syvyys (tuumaa)	Leveys/syvyys (cm)
6	14"	36 cm
7	16"	41 cm
8	18"	46 cm
9	20"	51 cm
10	22"	56 cm
11	24"	61 cm
12	26"	66 cm
13	28"	71 cm
14	30"	76 cm

Huomaa: Yllä olevia taulukoita ei ole rajoitettu

Toimitussisältö:

A – Ilmakennot: Kennot on kytketty toisiinsa, joten ilma kiertää tasaisesti koko tyynyn alueella

B - Käsipumppu: kaksitoiminen pumppu, jolla täytetään ilmakennot täyttöventtiilin kautta

C – täyttöventtiili: tukee ilman virtausta tyynyyn

D1 – Käsipumppu: Sininen/punainen käsipumppu täyttää lukitustaskut tyynyn pohjassa ja pysäyttää ilman virtauksen ilmakennojen välillä sekä jättää tyynyn käyttäjän muotoa mukailevaksi.

D2 – Turvaventtiili: Turvaventtiili estää X-asennossa letkuihin nähden ilman karkaamisen ulos lukitustaskuista.


D3 – Vapautuspainike: Tämän painikkeen painaminen vapauttaa ilman lukitustaskuista ja päästää ilman virtaamaan ilmakennojen välillä.

E – Päällinen: Päälliset on valmistettu nailonista, spandeksista, polyesteristä sekä luistamattomasta materiaalista, jotta tyyny ei liikkuisi pinnalla.

F – Tasku: Säilytä pumpppua tässä taskussa, kun se ei ole käytössä.

G – Omistajan opas

H - Korjaussarja: Pienet tyynyn reiät voidaan korjata helposti korjaussarjalla. Korjaussarja sisältää 3 paikkaa, hiomapaperia, 3 hammastikkua ja ohjekortin.

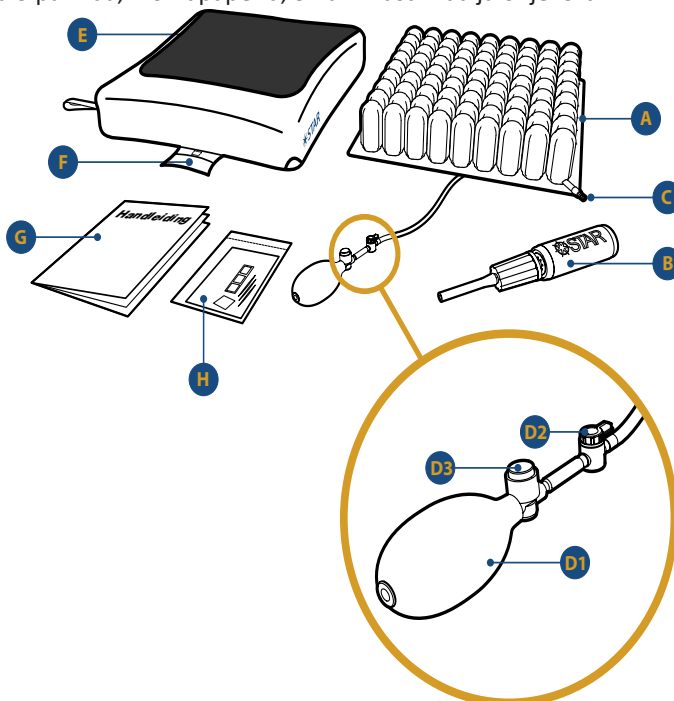


Käyttöohjeet:


Lue ohjeet huolellisesti ja noudata ohjeita Star Cushion -tyynyn oikeaa säätämistä varten. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tämän dynaamisen ilmakennotyydyn väärän täyttämisen, jolloin se ei toimi suunnitellun mukaisesti.

Tyynyn täyttäminen:

1. Ota tyynyyn kiinnitetty täyttöpumppu esiin. Pumpussa on musta vapautuspainike ja lukitusventtiili. Varmista, että lukitusventtiili on auki (samaa suuntaan letkujen kanssa). Paina mustaa vapautuspainiketta noin 3 - 5 sekuntia ja varmista, että kaikki ilma on päässyt pois lukitustaskuista.
2. Paikanna tyynyn ilmaventtiili tyynyn kulmasta ja avaa se kääntämällä hopeanväristä kärkeä vastapäivään. Älä käytä voimaa venttiilin avaamiseen tai sulkemiseen. Venttiilistä saa helposti erittäin tiiviin.
3. Kiinnitä mustan käsipumpun kumiletkun pää avoimeen venttiiliin. Varmista, että pumpun letku tulee tiiviisti venttiilin päälle.

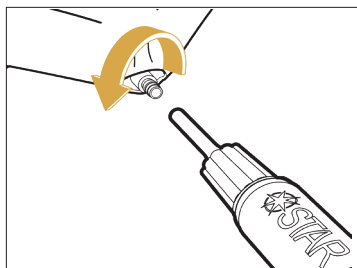


4. Kun pumppu on kiinnitetty, pumpppaa tyyny kohtalaisen täyteen.
Huomaa: Kohtalainen täyttö on saavutettu, kun tyynyn keskiosa alkaa nousta kaarelle.
5. Irrota pumppu tyynyn venttiilistä ja avaa venttiilin kärkeä kääntämällä sitä vähän myötäpäivään.

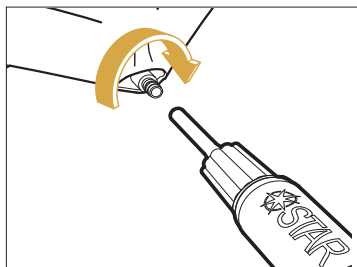


6. Kun venttiili on kiinni, ilmaa ei pääse ulos.

Tyynyn täyttäminen omien tarpeiden mukaan:

1. Aseta tyyny nyt tuolille täyttöventtiili eteenpäin, vasen kulma (katso alla oleva kuva) ja täyttöpumppu eteen. Istu tyynylle ja tuolille asianmukaisessa istuma-asennossa.
Varmista, että kädet ja jalat ovat asianmukaisessa ja mukavassa asennossa.

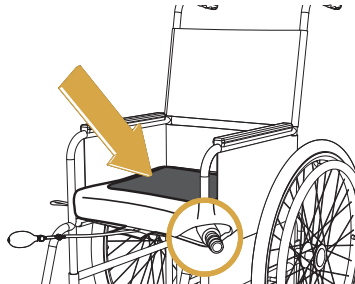

2. Aseta nyt käsi tyynyn ja luisimman kohdan, yleensä istuinkyhmy, väliin.
3. Avaa venttiiliä ja aloita hitaasti ilman päästäminen tyynystä. Käytä sormiasi mittana luisimman kohtasi (yleensä istuinkyhmyt) ja tyynyn pohjan välillä, kun ilmaa päästetään tyynystä.
4. Jatka ilman tyhjentämistä, kunnes olet suunnilleen $\frac{3}{4}$ " (2 cm:n) päässä tyynyn pohjasta (katso kuva). Sulje tässä vaiheessa venttiiliä varovasti kääntämällä ulompaa hopeanväristä kärkeä myötäpäivään suljettuun asentoon.

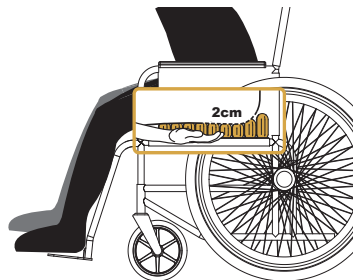


Vaihe 3: Säädä Star Lock -tyynyn vakautta ja asentoa (tarvittaessa):


1. Kun olet tehnyt vaiheet 1 ja 2, voit säätää Star Lock -tyynyn vakautta ja asentoa lukitsemalla ilmanvirtauksen kennojen välissä.
2. Se tapahtuu ensin istumalla (tai asettamalla potilas istumaan) tyynylle haluttuun istuma-asentoon. Star Lock sopii moniin erilaisiin istumisen ongelmiin kuten puolieroon ja kallistumiseen tai kontaktialueen puuttumiseen.
3. Kun tyyny on paikoillaan, varmista että turvaventtiili on linjassa käsipumpun letkujen kanssa.



4. Pumppaa sitten kiinnitetyllä käsipumpulla, kunnes pumppaus muuttuu raskaaksi (yleensä 15 kertaa tai enemmän) riippuen tyynyn koosta. Tällöin lukitustaskut täyttyvät ja paineistuvat kokonaan, mikä lukitsee säädetyn ilman määrän kuhunkin kennoon ja jättää tyynyn käyttäjälle tarkoitettuun muotoon. Täytetyt lukitustaskut näkyvät tyynyn pohjassa, kun suoja poistetaan. Tyyny on nyt lukittu.
5. Kun käyttäjän haluama asento on saavutettu ja lukittu paikalleen (tämän kohdan vaiheet 2-4), käännä turvaventtiili kiinni (niin, että se asettuu X-muotoon letkuihin nähden).

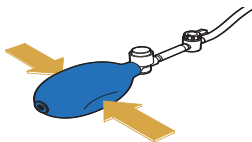

6. Tarkista käyttäjän asento tyynyssä ja tuolissa. Jos lisäsäätöjä tarvitaan, käännä ensin turvaventtiili auki-asentoon (letkujen suuntaisesti). Paina sitten pumpun mustaa vapautuspainiketta ja pidä sitä painettuna vähintään 5 sekuntia, jotta ilma pääsee ulos lukitustaskuista. Toista tämän kappaleen vaiheet 2 - 5. Näin varmistetaan, että haluttu istuma-asento säilyy.

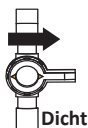


Päällisen käyttö ja irrottaminen:

Jokainen tyyny toimitetaan päällisellä, jotta tyynyn kennot eivät laajene tyynyn mittoja suuremmiksi esimerkiksi siirryttäessä pyörätuoliin siirtymälaudalla. . Päällisen pohja on valmistettu luistamattomasta materiaalista, johon on kiinnitetty tarranauhat pitämään tyyny paremmin paikoillaan tuolissa.

Tyynyn suojaaminen:

1. Aseta päällinen tasaiselle pinnalle luistamaton materiaali ylöspäin ja tarranauha itseesi päin.
2. Avaa tarranauhalla varustettu läppä ja työnnä tyyny pumppuineen päällisen sisään kennot alas päin.
3. Vedä pumppua varovasti päällisen reiän läpi taskuun.
4. Sulje tarranauhalla varustettu läppä ja käännä tyyny toisin päin, jolloin kennot osoittavat ylöspäin.
5. Varmista, että venttiili tulee ulos kulmasta täyttöö ja tyhjennystä varten. Tyyny on nyt valmis käytettäväksi heti, kun se on oikein säädetty (katso käyttöohjeet).
6. Aseta päällisellä peitetty tyyny tuoliin. Pumpun sisältävä tasku tulee eteen. Luistamaton materiaali on pohjalla, kennot peitettynä ja venttiili kohti kulmaa. Lue tyynyn merkintä ja varmista, että tyyny on asetettu tuoliin oikein päin.

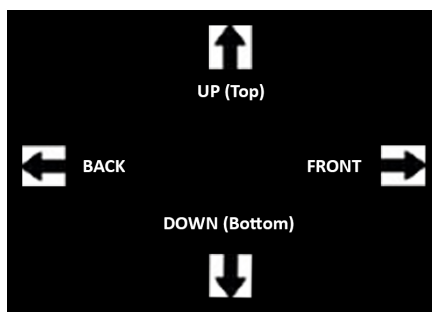

Päällisen poistaminen: Irrota tarranauhalla varustettu läppä ja poista tyyny päällisestä. Kiinnitä tarranauhat takaisin ennen päällisen puhdistamista tai mahdollisten vaurioiden tarkistamista. Vaihda tarvittaessa.

Päällisen puhdistus- ja desinfiointiohjeet:



Sulje tarranauha ennen pesua!

Päällisen puhdistus: Poista päällinen. Konepesu kirjopesulla maks. 60 °C miedolla pesuaineella. Pestävä samanväristen kanssa. Ei valkaisu. Huuhtelee kylmässä vedessä ja rumpukuivaa alhaisessa lämpötilassa tai ripusta kuivumaan.

Päällisen desinfiointi: Desinfiointia varten päällinen voidaan pestä koneessa kuumassa vedessä (80 °C). Rumpukuivaus matalassa lämpötilassa.

Star Cushion Products, Inc. ei vastaa vahingoista, joita pesukone tai kuivain saattavat aiheuttaa.

Tyynyn puhdistus- ja desinfiointiohjeet:

Ennen puhdistusta/desinfiointia tyynyn päällinen on poistettava ja pestävä erikseen.

Puhdistuksessa tuotteesta poistetaan lika ja orgaaninen materiaali.

Desinfioinnilla tapetaan patogeeniset mikro-organismit.

Puhdistusta edellytetään ennen desinfiointia.

Tyynyn puhdistus: Sulje tyynyn venttiili. Pese Star Cushion -tyyny käsin pesuliinalla, sienellä ja/tai pehmeällä harjalla haaleassa vedessä nestemäisellä astianpesuaineella, pyykinpesuaineella tai yleispesuaineella. (ÄLÄ KÄYTÄ konetiskiaineita, sillä ne ovat liian syövyttäviä). Liuota tarvittaessa tuotetta tuotemerkintöjen mukaan pinnan puhdistamiseksi. Harjaa kaikki ilmakennot ja niiden välit huolellisesti. Huuhtelee huolellisesti puhtaalla vedellä. Anna tyynyn kuivua noin 15 minuuttia. Jos se ei ole täysin kuiva, kuivaa märät kohdat pyyhkeellä. ÄLÄ LAITA TYYNYÄ PESUKONEESEEN, KUIVAIMEEN TAI YLI 37 °C:N LÄMPÖTILAAN.

Tyynyn desinfiointi: Säännöllinen puhdistus on ainoa suositeltava toimenpide, ellei potilaalla ole diagnosoitua infektiota tai avohaavaa. Jos desinfiointia tarvitaan, noudata yllä annettuja puhdistusohjeita sekoittamalla 1 osa kotitalouskäyttöön tarkoitettua kloorivalkaisuainetta 9 osaan lämmintä vettä. Liota 10 minuuttia liuoksessa, huuhtelee kokonaan ja kuivaa huolellisesti. Älä käytä laimentamatonta valkaisuainetta!

Huomaa: Useimmat bakteereja tappavat desinfiointiaineet ovat turvallisia valmistajan ohjeiden mukaan käytettyinä.

ÄLÄ:

- konepesese tai rumpukuivaa tyynyä.
- käytä hankausaineita kuten teräsvillaa tai hankauslappuja.
- käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät bensiiniä tai orgaanisia liuottimia.
- päästä vettä tai puhdistusnestettä tuotteeseen (varmistaa, että venttiili(t) ovat kiinni ennen kuin aloitat).
- altista tuotetta ultraviolettivaloon tai otsonikaasun perustuvilla puhdistusmenetelmille.
- käytä öljypohjaisia emulsioita, lanoliinia tai fenolipohjaisia desinfiointituotteita, sillä ne saattavat heikentää materiaaleja.

Tyynyn sterilointi: Noudata yllä olevia puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Star Cushion -tuotteita ei ole pakattu steriileiksi, eikä niitä tarvitse steriloida ennen käyttöä. Korkeat lämpötilat saattavat nopeuttaa tuotteen ikääntymistä ja aiheuttaa vaurioita tai vikoja. Jos laitoksen toimintatavat edellyttävät sterilointia, avaa venttiili ja käytä alhaisinta mahdollista lämpötilaa lyhyimmän mahdollisen ajan. Kumpaakaan ei suositella, mutta kaasulla sterilointi on parempi vaihtoehto kuin höyryautoklaavi. Jos prosessissa käytetään painetta, varmista että kaikki venttiilit ovat auki, jotta tuote ei vaurioidu. Star Cushion Products, Inc. suosittelee ehdottomasti välttämään ilmasäädettävien tuotteiden kohdalla sterilointimenetelmiä, joissa käytetään yli 82 °C:n lämpötiloja.

Hajunpoisto: Hajunpoisto suoritetaan sekoittamalla yksi ruokalusikallinen ruokasoodaa (25 gm/l) 10 osaan vettä. Liota useampi tunti, huuhtelee ja jätä kuivumaan. Tämän voi joutua toistamaan useampaan kertaan. Puhdista tuote usein tai käytä inkontinenssipäällistä voimakkaiden hajujen ja tahrojen välttämiseksi.

Takuu:

Tyynyn rajoitettu kahden vuoden takuu Rajoitettu tyynyn päällisen kolmenkymmenen päivän takuu

Star Cushion antaa materiaali- ja/tai valmistusvirheiden varalta tyynylle takuun kahdeksi vuodeksi ostopäivästä lukien ja tyynyn päälliselle kolmeksikymmeneksi päiväksi ostopäivästä lukien.

Tyynyn tai sen päällisen takuu ei kata seuraavaa:

1. osien vaihdot tai korjaukset, jotka johtuvat väärästä käytöstä, laiminlyönneistä tai ulkopuolisten esineiden aiheuttamista rei'istä.
2. päivittäinen kuluminen tai vahingot, jotka johtuvat näiden käyttöohjeiden sisältämien ohjeiden laiminlyönnistä.

Takuun myöntäjä **ei** ole vastuussa välillisistä tai tuottamuksellisista vahingoista.

Star Cushion edellyttää takuujakson todentamiseen todistusta ostopäivästä kuten alkuperäistä ostokuittia.

Takuuhuolto on saatavilla palauttamalla tyyny ja/tai päällinen käyttäjän omalla kustannuksella osoitteella:

Star Cushion Products, Inc.
Attn: Repairs
5 Commerce Drive
Freeburg, IL 62243, USA

Osa osavaltioista ei hyväksy rajoituksia siihen, kuinka pitkään takuu on voimassa, joten nämä rajoitukset eivät ehkä koske sinua. Kaikki myönnetyt takuut tämän tuotteen suhteen on rajoitettu kahteen vuoteen ostopäivästä tyynylle ja 30 päivään tyynyn päälliselle.

Tämä takuu antaa ostajalle tietyt lailliset oikeudet. Sinulla saattaa olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

Kansainvälinen takuu: Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään. Jälleenmyyjäluettelo löytyy osoitteesta www.starcushion.com tai ottamalla yhteyttä Star Cushioniin (katso yhteystiedot).

Palautukset:

Kaikkien palautettavien tuotteiden on oltava uusia ja käyttämättömiä. Palautukseen on saatava Star Cushion Products Inc:n etukäteislupa, ja palautusmaksu saatetaan periä. Ennen tuotteen palauttamista Yhdysvaltoihin on oltava yhteydessä takuuosastoomme.

Hävittäminen:

Tämän tuotteen osiin ei tunneta liittyvän ympäristövaaroja oikein käytettynä ja hävitettynä. Tuotteen ja/tai sen osien hävittäminen tulee tehdä voimassa olevien määräysten ja lakien mukaan. EI SAA HÄVITTÄÄ POLTTAMALLA.

Vianmäärittäminen:

Ilma ei pysy tuotteessa:

1. Avaa venttiili(t) vastapäivään kääntämällä ja lisää tyynyyn ilmaa mustalla käsipumpulla.
2. Sulje venttiili(t) tiukasti kääntämällä venttiileitä myötäpäivään.
Jos ilma ei edelleenkään pysy
3. Tarkista, ettei näkyviä reikiä ole. Jos reikiä ei ole näkyvissä, upota tyyny (venttiilit tiukasti kiinni) vesialtaaseen tai -ammeeseen ja tarkista, näkyykö kuplia.
 - Jos löydät neulanpään kokoisia reikiä, käytä tuotteen mukana toimitettua korjaus-sarjaa ja noudata sen ohjeita.
 - Jos suuria reikiä tai muita vuotoja löytyy, lue kohta Takuu.

Epämukava/epävakaa tuote:

- Varmista, ettei tyyny ole täytetty liian täyteen (lue käyttöohjeet).
- Varmista, että ilmakennot ja suojan venyvä päällys ovat ylöspäin (merkintä "UP").
- Varmista, ettei tyyny ole liian suuri tai pieni kyseiseen pyörätuoliin.

Anna käyttäjän istua tyynyllä vähintään tunnin ja tottua tuotteen pinnan rakenteeseen ja vajota ilmakennoihin.

Yhteystiedot:

Star Cushion, kansainvälinen: intl@starcushion.com

Tai käy osoitteessa www.etac.com, josta löytyy jälleenmyyjäluettelo.

Etac AB (export)
Box 203
334 24 Anderstorp
Sverige
Tel +46 371-58 73 30
Fax +46 371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.com

Haltija
Koivuhaantie 2-4 D
01510 Vantaa
Finland
Puh. 09 612 2250 (vaihde)
asiakaspalvelu@haltija.fi
www.haltija.fi



STAR

a part of Etac

Valmistaja:

Star Cushion Products, Inc.
5 Commerce Drive
Freeburg, IL 62243, USA

Puhelin: (618)539-7070
Maksuton: (888)277-7827
Faksi: (618)539-7073
Sales@starcushion.com
www.StarCushion.com



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
33424 Anderstorp
Ruotsi



Valvonta-asiakirjan

QF 71-26

last updated 11/19/2019